

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО САМОДИАГНОСТИКЕ

CE 1434 для обнаружения антигена COVID-19 - Тампон для носа

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ТЕСТИОВАНИЕМ



Высморкайтесь, чтобы очистить носовые ходы перед проведением теста.

Вымойте руки и держите их сухими.

Используйте свой телефон или часы в качестве секундомера.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



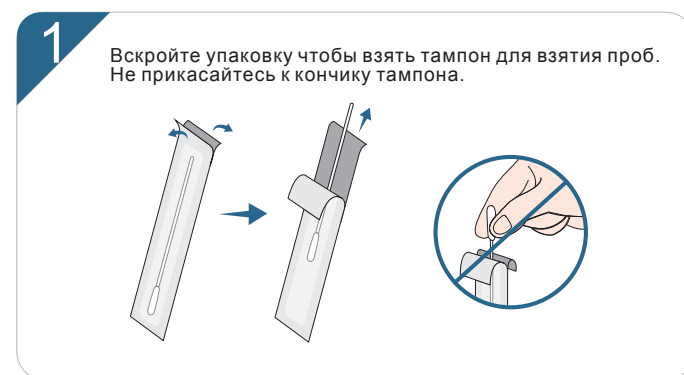



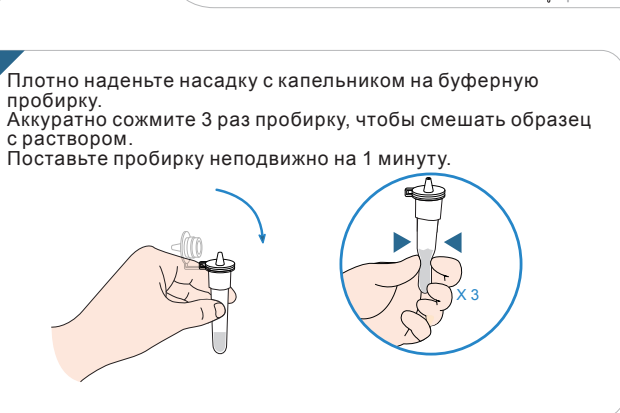
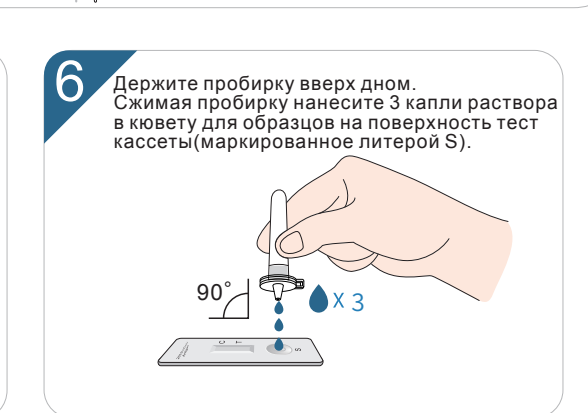


Тестовая кассета

Буферная пробирка и Насадка с капельником

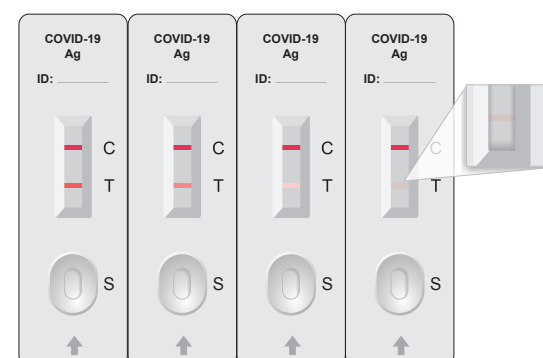
Стерильный тампон

Инструкция по применению Набор

ПРОЦЕДУРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

- 1** Вскройте упаковку чтобы взять тампон для взятия проб. Не прикасайтесь к кончику тампона.

- 2** Аккуратно введите кончик тампона на 2,5 см в две носовые полости на 20 секунд в каждую и сделайте 5 оборотов.
Для детей максимальная глубина может быть меньше 2,5 см и должна быть соответствующим образом скорректирована лицом, берущим пробу.

- 3** Поместите тампон в буферную пробирку. Проверните тампон в растворе не менее 5 раз.

- 4** Сожмите пробирку пальцами. Вынимайте и вставляйте тампон вверх и вниз не менее 3 раз, для отделения жидкости из тампона. Выньте тампон.

- 5** Плотно наденьте насадку с капельником на буферную пробирку. Аккуратно сожмите 3 раз пробирку, чтобы смешать образец с раствором. Поставьте пробирку неподвижно на 1 минуту.

- 6** Держите пробирку вверх дном. Сжимая пробирку нанесите 3 капли раствора в кювету для образцов на поверхность тест кассеты (маркированное литерой S).

- 7** Подождите результат 15 минут. Результаты считаются неточным и недействительным через 30 минут. НЕ используйте повторно образец с раствором на использованную тестовую кассету. (не используйте один тест дважды).

- 8** Утилизируйте использованные компоненты теста в герметичном пакете в бытовых отходах в соответствии с местными правилами.


ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



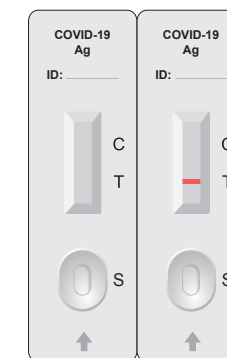
Положительный :

Положительный (+): Красные полосы появляются как на линии T, так и на линии C через 15-30 минут. Любой видимый оттенок тени на T-линии следует считать положительным.



Отрицательный:

красная полоса появляется на линии C, в то время как на линии T красная полоса не появляется через 15-30 минут после загрузки образца.



Недопустимо:

Если в строке C не отображается красная полоса, это означает, что результат теста недействителен.