

KENDİ KENDİNE TEST İÇİN HIZLI KILAVUZ

CE 1434

COVID-19 Antijen Tespit Kiti- Nazal Sürüntü

TEST ÖNCESİ HAZIRLIK



Burnunuzu temizlemek için sümkürün.



Ellerinizi yıkayın ve kurulayın.




Telefonunuzu veya saatinizi süre tutmak için kullanın.

ÜRÜN BİLEŞENLERİ



Test Kartı

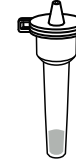

Numune Ekstraksiyon
Tüpü & Tüp Kapağı



Numune Çubuğu




Kullanım Talimatları

TEST PROSEDÜRLERİ


1

Numune çubuğunu almak için paketi açın.
Çubuğun ucuna sakın DOKUNMAYIN.

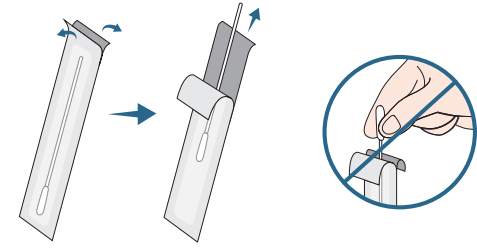


2

Eküvyon ucunu her biri 20 saniye boyunca iki burun boşluğuna 2,5 cm nazıkçe yerleştirin ve 5 tur döndürün.
Çocuklar için maksimum derinlik 2,5 cm'den az olabilir ve numuneyi alan kişi tarafından uygun şekilde ayarlanmalıdır.

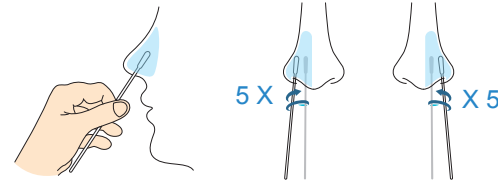

3


Numune çubuğunu ekstraksiyon tüpüne yerleştirin ve çözelti içinde çubuğu 5 tur karıştırın.

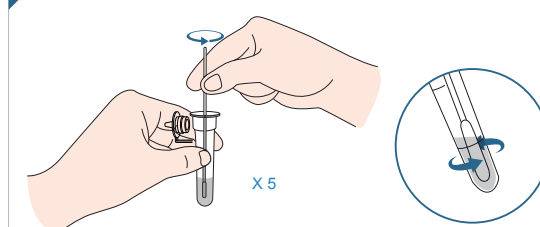

4


Tüpü parmaklarınız ile sıkın.
Numune solüsyonunu çubuk üzerinden temizlemek için çubuğu en az 3 kez aşağı yukarı hareket ettirin.

Numune çubuğunu çıkarın.

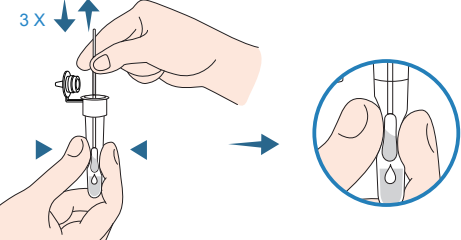


5

Tüp kapağı ile ekstraksiyon tüpünü sıkıca kapatın.
Numune çözeltisini karıştırmak için tüpü 3 kez hafifçe sıkın.
Daha sonra tüpü 1 dakika boyunca hareketsiz bırakın.

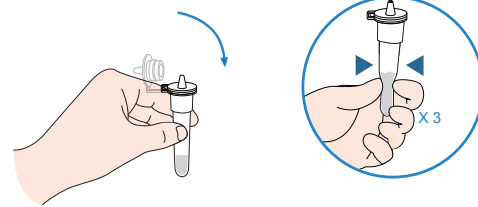


6

Tüpü ters çevirin.
Test kartı üzerindeki yükleme kısmına "S" 3 damla numune çözeltisi eklemek için tüpü sıkın.

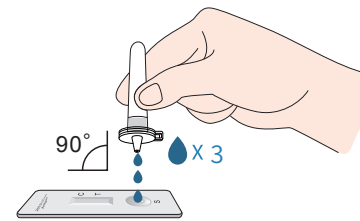


7

15 dakika sonra sonuca bakın.
Sonuçlar 30 dakika sonra yanlış ve geçersiz kabul edilir.
Numune çözeltisini kullanılmış bir test kartına DÖKMEYİN.

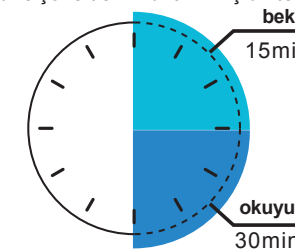


8

Kullanılan test bileşenlerini yerel yönetmeliklere uygun olarak evsel atıkların içinde kapalı bir torba içerisinde atın.

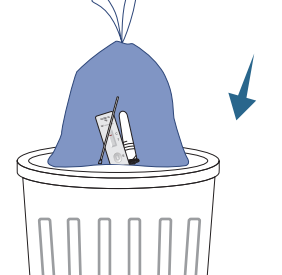

ÇIKAN SONUCUN YORUMLANMASI

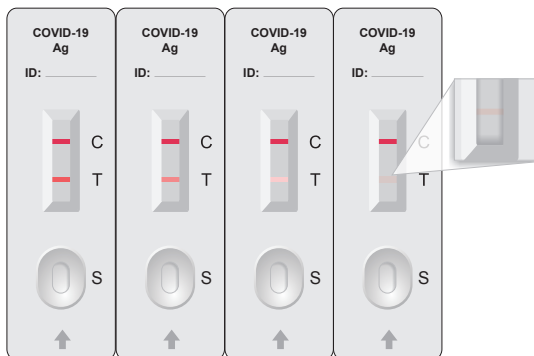


Pozitif :

Kırmızı çizgiler 15-30 dakika içerisinde hem T hem de C kısmında gözükür.
T kısmındaki kırmızı çizgi soluk olsa bile sonuç pozitif olarak kabul edilir.



Negatif:

Numune yerleştirildikten sonra 15 ila 30 dakika içerisinde C kısmında kırmızı çizgi olur ancak T kısmında kırmızı çizgi olmaz.

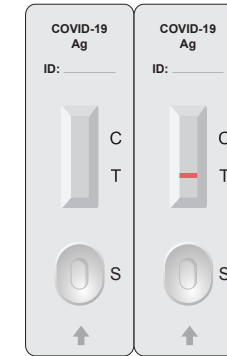

Geçersiz:

C kısmında herhangi bir kırmızı çizgi yoksa test sonucu geçersizdir.
Başka bir test kartı ile tekrar test edin.